

シリンジに集中! 確実・安全! スピードアップ!

デザイン保護寄託済み




ワンタッチ交換・固定

針先が指に向かわない

バイアル瓶を温めない

高度な手技を必要としないため、
人材確保・持ち回りの幅が拡大

前面オープン設計による
良好な針先視界

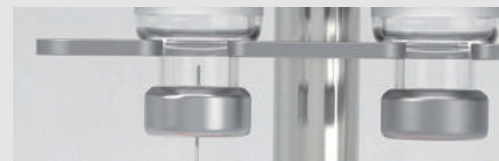

最適な瓶角度による
ゴム栓の直視、液の完全採取


手指サポートにより
指先が安定し
ストレス・疲労低減
(高さ調節可)

ファイザー社製
モデルナ社製など
プレート交換により
異種のバイアル瓶へ対応

ステンレス製により
アルコール消毒
滅菌可能

安定性が高く持ち運び自在

視線

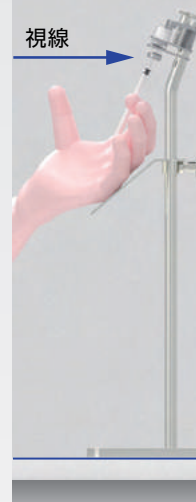

ファイザー製、
モデルナ製瓶に
完全対応

(6本同時セット可能)

ファイザー製では
0.3ml×7本充填可

既設の導入現場で
検証・確認済み
(要ローデッドシリンジ)

会議机(高70cm)使用

仕様

本体寸法	W200×H420×D200
材質	SUS304、シリコン
重量	5.5kg

プレスリリース



商品規格

品名	入数	型式	JANコード
クイックフィラー P	1台	QF-P6-1	4589413370673
クイックフィラー M	1台	QF-M6-1	4589413370680



地方自治体 新型コロナワクチン接種プロジェクト

医療担当者様 並びに 医師会・薬剤師会 様

職域接種企業 並びに 大学等接種における医療担当者様

新型コロナワクチン接種につきましては施策推進、ご努力に感謝申し上げます。
医療機器メーカーである弊社は、ワクチン接種の現場を支える医療スタッフ様に、
より安全、清潔、スムーズに接種準備を進めていただけますよう、
バイアル瓶ホルダー“Quick Filler”を開発いたしました。
全国の複数自治体等ですでに稼働中、御高評をいただいています*。
実際に従事される方々と御相談の上、是非とも御導入の栄を賜れば幸甚に存じます。

『助かっています!』
お声をいただいています

*【ファイザー対応】 上川町（北海道）、能代市（秋田県）、久慈市（岩手県）、奥州市（岩手県）、大崎市（宮城県）、五泉市（新潟県）、邑楽町（群馬県）、
小牧市（愛知県）、相楽郡南山城村（京都府）、相楽郡精華町（京都府）、木津川市（京都府）、川崎町（福岡県）、粟国村（沖縄県）他
【モデルナ対応】 京都大規模接種会場（京都府）、富士通株職域接種会場（神奈川県）、東京海上日動火災保険株職域接種会場（東京都）他

COVID-19 ワクチン対応

Quick Filler
クイック フィラー

- シリンジのみを両手で持つことで、計量操作が容易で確実、
分注作業のストレス・疲労を軽減・改善します。
- 瓶とシリンジを同時に持つ手技を必要としないため、
分注作業の安全性、効率・スピードが上がり、**接種現場の
人的ローテーションを容易に**します。
- 下部に薬剤が集まり 0.3ml×7本採取も**短時間**で行えます。
ワクチン準備数と接種者数の偶発的不一致の解消など、
柔軟な対応に威力を発揮し、**会場運営が安定化**します。
（希釈済みファイザーワクチンは粘ちょう性があります）
- 瓶のセットによる手順の見える化が、**ミス低減**に繋がります。

大規模接種、職域接種でのモデルナ製ワクチン対応品も販売中

Quick Filler 紹介動画



ご予約、価格、納期、
試用貸出等の
お問い合わせフォーム



全容・詳細は、
裏面カタログ、動画をご覧ください

三田理化メディカル株式会社は創業以来
医療従事者のサポートや患者 QOL の向上を目指し
医療現場における様々な課題を
アイデアと工夫で解決する商品開発を進めています

RACoon Medical

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-17-13-102

千種潤也（ちぐさじゅんや）

TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

mail jchigusa@racoon-medical.co.jp